

Siège de douche à lattes Bama

Instructions d'installation et d'entretien

Utilisation du siège de douche

Le siège de douche peut uniquement être utilisé pour les tâches auxquelles il est destiné. Ne pas se tenir debout sur le siège ni en faire un usage anormal. Cela peut réduire la résistance du siège de douche et rendra nulle toute garantie ou capacité de poids déclaré. Le siège de douche doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié. Les enfants et les autres utilisateurs peuvent demander une surveillance lors de l'utilisation de ce produit. Ne jamais dépasser la charge maximale de 200 kg.

Veillez à conserver votre siège de douche AKW propre


Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage pour salle de bains domestique. N'utilisez pas de produits de nettoyage présentant une forte concentration acide, alcaline ou abrasive, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. Après nettoyage, rincez toujours à l'eau, puis essuyez à l'aide d'un tissu humide pour retirer tout résidu de produit de nettoyage avant de la sécher.

Désinfection

Si une désinfection est nécessaire, suivez avec précaution les procédures normales de désinfection et respectez les avertissements relatifs aux effets possibles de produits chimiques agressifs sur le plastique. AKW n'approuve et ne recommande pas le nettoyage par autoclave en raison des détériorations qu'une telle méthode peut entraîner au niveau des plastiques industriels spéciaux utilisés pour la réalisation de ce produit.

Emballage

Le siège de douche est fourni dans des sacs en polypropylène (PP) afin de conserver le produit propre jusqu'à son installation; les pièces peuvent éventuellement être emballées en vrac dans une boîte en carton. Les deux types d'emballage peuvent être recyclés et doivent être jetés conformément à la réglementation locale en matière de recyclage.

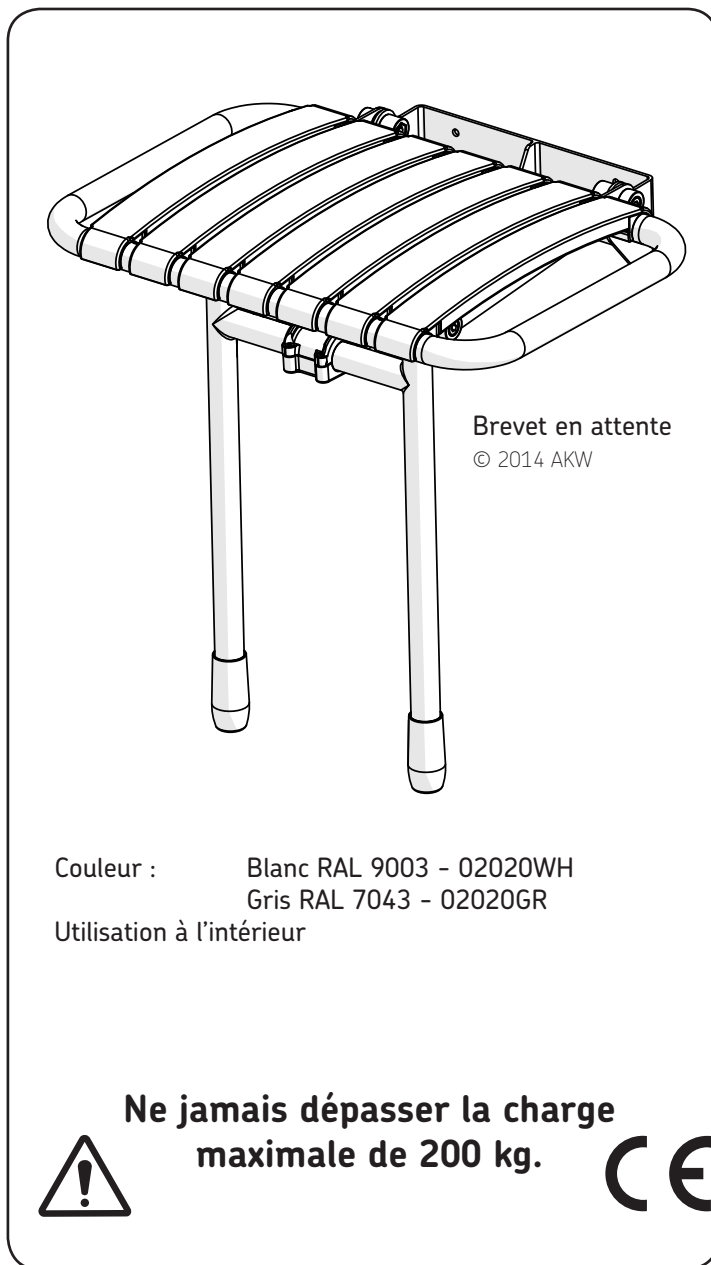

Brevet en attente
© 2014 AKW

Couleur : Blanc RAL 9003 - 02020WH
Gris RAL 7043 - 02020GR
Utilisation à l'intérieur








Ne jamais dépasser la charge maximale de 200 kg.



Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou si vous procédez à des modifications non autorisées, ceci annule toute garantie et aura une incidence sur la sécurité du produit.

Dimensions du siège

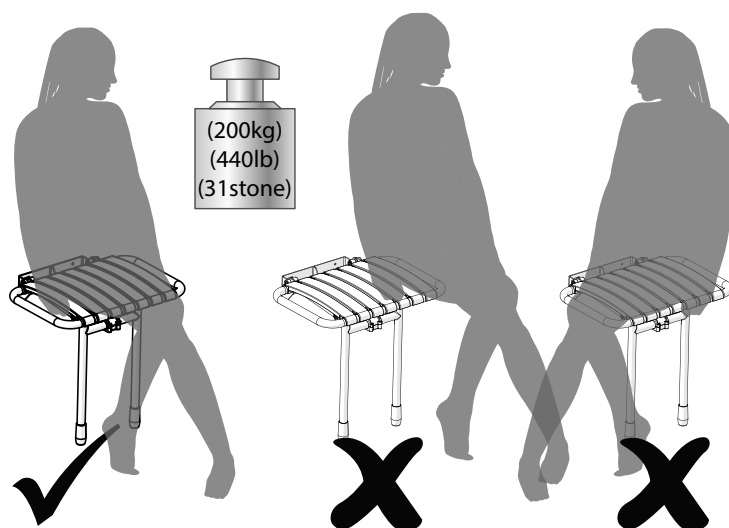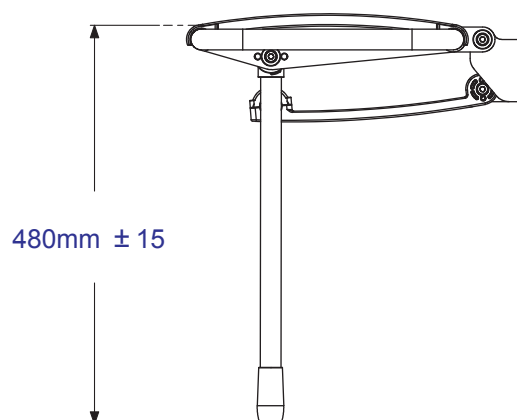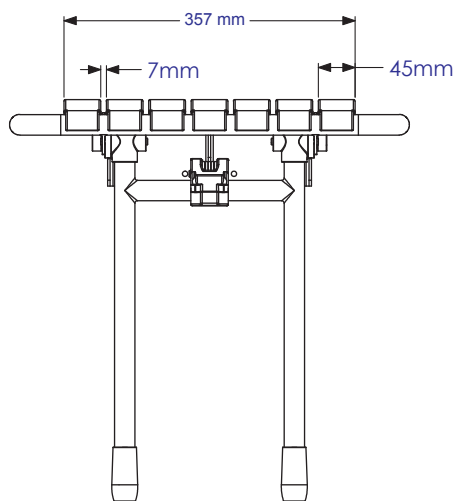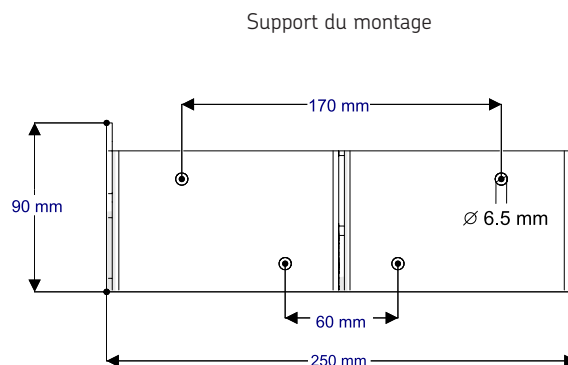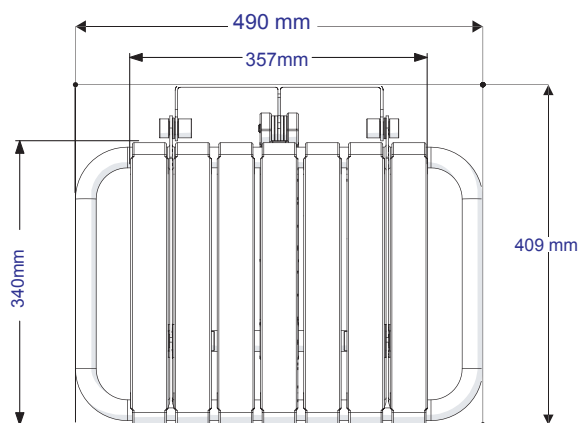

Données techniques du siège de douche Bama

Ce produit est destiné à une installation unique
Charge maximum : 200kg

* La charge maximale de poids est valide seulement pour ce siège. La fixation et l'installation sur le support destiné au montage sont les responsabilités de l'installateur

Gamme des températures d'opération : +5°C to +35°C.

Matériaux de construction:

Support du montage: SS304/201
Couverture du support du montage: SS304/201
Plastiques: ABS/Nylon



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive pour les dispositifs médicaux 93/42/EEC et des échantillons représentatifs ont été évalués dans le cadre EN12182:1999 et EN12727:2000. Pour utilisation comme un siège de douche (d'assistance de classe 1). Déclaration émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Les sièges de douche AKW sont conformes aux exigences de la directive 93/42/EEC du Conseil de l'UE pour un dispositif de classe 1 à un usage temporaire non invasif, en utilisant les normes européennes harmonisées suivantes:
BS EN 12182:1999, BS EN 12727:2000.

Téléphone EU : +32 (0) 68 33 48 99 - Téléphone FR : 09 72 29 24 05 - Fax : +32 (0) 68 33 16 58

Email : ism@akw-medicare.com

© 2014 AKW

13-016-056-01F

AKW
life. style. choice.

Instructions d'installation



Ne pas utiliser des fixations avec des têtes fraisées.






Ce siège doit être fixé à une surface verticale à l'aide de fixations appropriées pour le type de conditions de surface et de chargement à appliquer. Ajuster les pieds de support et s'assurer que les pieds soient sur une surface plane quand le siège est en position abaissée (maximum 1:40 inclinaison du bac de douche). Les surfaces courbées comme les angles de baignoire ne sont pas acceptables. Assurez-vous que le siège n'est pas en contact avec d'autres produits quand il est levé ou abaissé. Veillez à ne pas endommager la surface.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

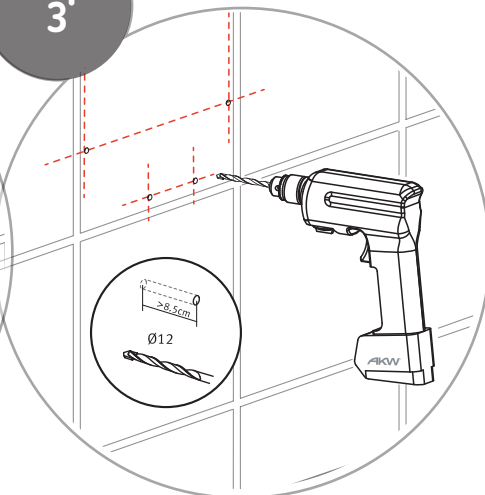
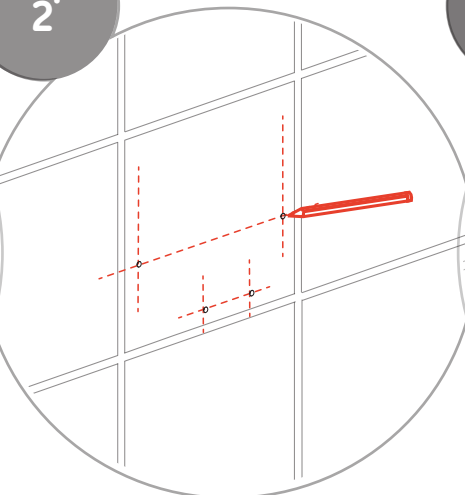
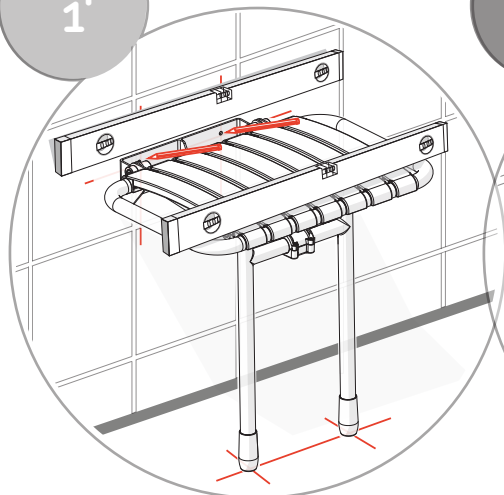


(1) Marquez la position de la platine de fixation sur le mur avec le siège en position horizontale. (2) Utilisez un morceau de ruban adhésif pour marquer le mur et le percer, celui-ci protégera le carrelage de l'éclatement. (3) Percez des trous avec une perceuse appropriée sur le ruban de masquage. (4) Utilisez des fixations murales adaptées pour sécuriser le support du montage et introduisez les chevilles. (5) Ne pas trop serrer les fixations car ceci peut avoir pour effet de réduire la résistance du cadre et d'annuler toute garantie ou capacité de charge stipulée. Ne pas utiliser des vis à tête fraisée. (6) Vérifiez la mobilité du siège, niveaux et position des pieds quand il est levé ou abaissé. Pour ajuster les pieds, il suffit de serrer les embouts sous le siège avec la clé à six pans de 6 mm.

Étape 4

Étape 5

Étape 6

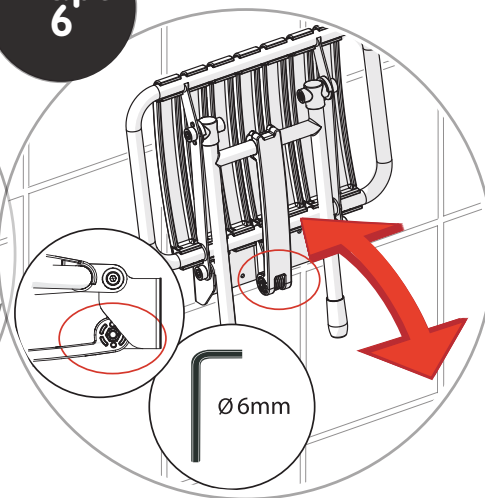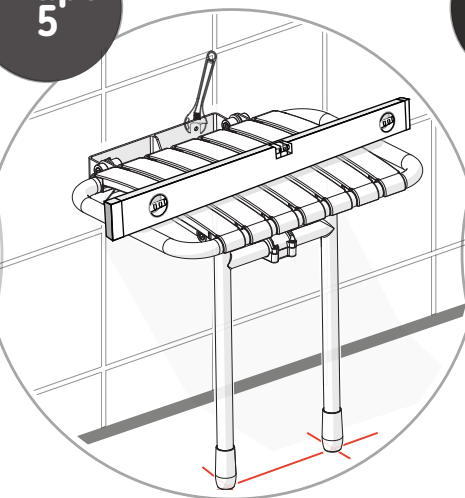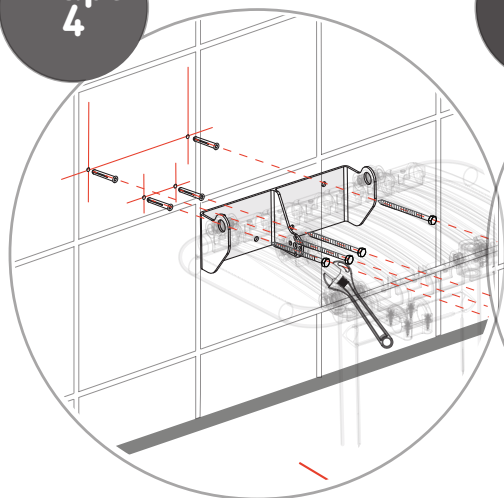

Nos sièges sont recommandés pour des applications internes. Ils peuvent être installés dans d'autres endroits, mais la durée de vie du produit ne sera pas atteinte. AKW est incapable de préciser le type de fixation à utiliser simplement à cause du grand nombre de types et de conditions de surfaces possibles.

Téléphone EU : +32 (0) 68 33 48 99 - Téléphone FR : 09 72 29 24 05 - Fax : +32 (0) 68 33 16 58

Email : ism@akw-medicare.com

CONSIGNES DE SECURITE

TOUJOURS lire ces instructions d'installation avant de procéder à l'installation de ce produit et laisser les consignes à l'utilisateur final.



ALWAYS faire installer les sièges par un installateur formé et compétent et adapter la hauteur à l'utilisateur.



ATTENTION fixez ce siège à une surface en utilisant des fixations adaptées au type de surface et aux conditions de chargement à appliquer.

NE JAMAIS dépasser la capacité de poids de 200kg.

NE JAMAIS installez des vis à tête fraisée aux trous de fixation.

NE JAMAIS se tenir debout sur le siège. Cela peut réduire la résistance du siège de douche et rendra nulle toute garantie ou capacité de poids déclaré.



ATTENTION Il peut y avoir un risque de pincement lorsque le siège est relevé vers le mur.

ATTENTION Agrandir les trous de fixation diminue la solidité du siège de douche, sa résistance et annule toute garantie.



Commandes / Informations Europe
0032 (0)68 33 48 99

Commandes / Informations France
09 72 29 24 05

Fax
0032 (0)68 33 16 58

Site web
www.akw-medicare.com

Commandes
ism@akw-medicare.com

Adresse
Zone industrielle Tournai Ouest
20 rue de la terre à briques
7522 Marquain
Belgique

Conditions de la Garantie à vie - Exclusion de garantie :

Garantie à

VIE*

Les dommages et malfaçons causées par une mauvaise installation, dommage accidentel ou manque d'entretien, y compris les accumulations de saletés, des dépôts de calcaire et des sédiments transportés par l'eau.

Dommages causés par un nettoyage impropre ou par des infiltrations d'eau. Dommages causés par des réparations et modifications entreprises par des personnes non autorisées qui ne sont pas employés par AKW ou des techniciens.

La garantie s'applique seulement aux défauts d'usine et ne s'applique pas à l'usure normale, l'utilisation inadéquate ou les dommages accidentels.

Que faire si quelque chose se passe mal?

Dans le cas peu probable où une pièce serait manquante ou si quelque chose va mal, contactez votre installateur local et si le problème n'est pas solutionné, contactez le service client AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, s'il est nécessaire, organiser une visite d'un technicien. Dans le cadre de notre programme de formation à la qualité, les appels peuvent être enregistrés ou écoutés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Ces instructions sont fournies pour conseiller les normes minimales d'installation et recommander les meilleures pratiques pour l'installation. En raison de la très grande variabilité des conditions d'installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les instructions d'installation possibles. AKW n'accepte aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou à leur utilisation. Ces informations sont fournies à la condition que la personne qui le reçoit fait ses propres tests pour déterminer les états de charge et d'utilisation. Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et peut affecter la sécurité du produit. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Téléphone EU : +32 (0) 68 33 48 99 - Téléphone FR : 09 72 29 24 05 - Fax : +32 (0) 68 33 16 58

Email : ism@akw-medicare.com