

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODEL:A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODEL:A1



INTRODUCTION


Thank you for choosing our high-quality products. In order to minimize the risk of injury, we recommend that you take the necessary safety protection when using the product. Please read the following instructions carefully and understand.

Therefore, the operation and maintenance personnel must be familiar with the operation process and understand the possible safety hazards. Children are not allowed to use it. Please refer to the General Injury Prevention Code and Occupational Health and Safety Code.

This equipment does not need to be maintained by the user. Any maintenance, adjustment and repair require professional operations. Please keep this operation manual.

INSTALLATION OF SHOE COVER

 1	 2
Unfold a bundle of shoe covers paying attention to the length of the shoe cover	Squeeze the entire stack of buttons, along with the T-shaped slot at the corner of the shoe cover machine, and press the button into the slot
 3	 4
The shoe cover must be installed diagonally, and install the remaining clips in the same way as in step 2.	After the four corners are installed. loosen the tie that is tied to the shoe cover buckle

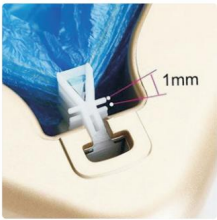

HOW TO USE THE DISPENSER



Let foot step in the middle of the machine



With a little effort, one step in the end



Shoe cover automatically put on



ATTENTIONS

1. Make sure the length and width sides of shoe covers are in the right direction with dispenser.
2. When loading more shoe covers, press the top T-Clip remaining inside the T-opening and put down the new T-clips at the same time. Otherwise the new T-clips cannot be loaded and the dispenser may be broken if pressing hard.
3. Make sure that T-clips are loaded to all corners and every ribbon on the T-Clips are untied.
4. Before using the dispenser, make sure that the top T-clip is pulled out of the opening about 1mm by the rubber band. If not, pull out the top T-clip slightly.
5. When using the dispenser, step in the center part of the dispenser and press with even and one-time strength. Otherwise the shoe cover releasing will be affected.
6. If the sliding block does not work well after using for a long time, spread some lubricating oil in the sliding slot to reduce the friction force.
7. The shoe cover release may be affected if shoe covers are loaded a long time before use. It is better to load the shoe covers just before using them.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE
COUVRE-CHAUSSURES**

MODÈLE : A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODÈLE : A1



erreurs peuvent néanmoins subsister. Si vous en constatez, veuillez nous contacter.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi nos produits de haute qualité. Afin de minimiser les risques de blessure, nous vous recommandons de prendre les mesures de sécurité nécessaires lors de l'utilisation du produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les comprendre.

Par conséquent, le personnel d'exploitation et d'entretien doit connaître le processus d'utilisation et comprendre les risques potentiels pour la sécurité. L'utilisation de l'appareil est interdite aux enfants. Veuillez vous référer au Code général de prévention des blessures et au Code de la santé et de la sécurité au travail.

Cet équipement ne nécessite aucun entretien par l'utilisateur. Tout entretien, réglage ou réparation requiert l'intervention d'un professionnel. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.

INSTALLATION COUVRE - CHAUSSURES

	
Déplier un paquet de couvre-chaussures en faisant attention à la longueur de le couvre-chaussures	Appuyez sur toute la pile de boutons, ainsi que sur le Fente en forme de T au coin du couvre-chaussure machine et appuyez sur le bouton bouton dans la fente
	
Le couvre-chaussures doit être installé en diagonale et installer les clips restants dans le même comme dans étape 2.	Une fois les quatre coins terminés installé. desserrez le lien qui est attaché à la chaussure couverture boucle



COMMENT POUR UTILISER LE DISTRIBUTEUR



Let foot step in the middle of the machine

With a little effort, one stop in the end

Shoe cover automatically put on



ATTENTIONS

1. Assurez-vous que les côtés longueur et largeur des couvre-chaussures sont dans la bonne direction avec le distributeur.
2. Lorsque vous chargez plus de couvre-chaussures, appuyez sur le clip en T supérieur restant à l'intérieur de l'ouverture en T et posez les nouveaux clips en T en même temps. Sinon, les nouveaux clips en T ne peuvent pas être chargés et le distributeur peut être cassé si vous appuyez fort.
3. Assurez-vous que les clips en T sont chargés dans tous les coins et que chaque ruban sur les clips en T est détaché.
4. Avant d'utiliser le distributeur, assurez-vous que le clip en T supérieur est retiré de l'ouverture d'environ 1 mm par l'élastique. Sinon, retirez légèrement le clip en T supérieur.
5. Lorsque vous utilisez le distributeur, appuyez sur la partie centrale du distributeur et appuyez avec une force uniforme et unique. Sinon, le relâchement du couvre-chaussures sera affecté.
6. Si le bloc coulissant ne fonctionne pas bien après une utilisation prolongée, étalez de l'huile lubrifiante dans la fente coulissante pour réduire la force de frottement.
7. La libération du couvre-chaussures peut être affectée si les couvre-chaussures sont chargés

longtemps avant utilisation. Il est préférable de charger les couvre-chaussures juste avant de les utiliser.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329
Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

AUTOMATISCHER ÜBERSCHUHSPENDER

MODELL: A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODELL: A1



Das Unternehmen ist stets bemüht, die Inhalte dieses Handbuchs stets aktuell zu halten. Dennoch können Fehler nicht vermieden werden. Sollten Sie Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.

EINFÜHRUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Produkte entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, bei der Verwendung des Produkts die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Daher muss das Betriebs- und Wartungspersonal mit dem Betriebsablauf vertraut sein und die möglichen Sicherheitsrisiken kennen. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Vorschriften zur Unfallverhütung und die Vorschriften zur Arbeitssicherheit.

Dieses Gerät muss nicht vom Benutzer gewartet werden. Wartung, Einstellung und Reparaturen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

INSTALLATION VON SCHUHÜBERZÜGEN

	
Entfalten Sie ein Bündel Überschuhe achten Sie auf die Länge der der Schuhüberzug	Sie den gesamten Tastenstapel zusammen mit dem T-förmiger Schlitz an der Ecke des Überschuhs Maschine und drücken Sie die Knopf in den Schlitz
	
Der Überschuh muss diagonal installiert, und installieren die restlichen Clips im selben Weg wie in Schritt 2.	Nachdem die vier Ecken installiert. Lösen Sie den Kabelbinder, der ist an den Schuh gebunden Abdeckung Schnalle

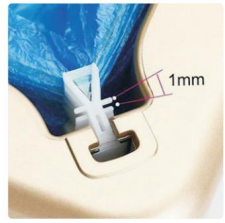

WIE VERWENDUNG DES SPENDERS



Let foot step in the middle of the machine



With a little effort, one stop in the end



Shoe cover automatically put on



ACHTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Längen- und Breitenseiten der Überschuhe mit dem Spender in die richtige Richtung zeigen.
2. Wenn Sie weitere Überschuhe einlegen, drücken Sie auf den oberen T-Clip, der sich noch in der T-Öffnung befindet, und legen Sie gleichzeitig die neuen T-Clips ab. Andernfalls können die neuen T-Clips nicht eingelegt werden und der Spender kann durch zu starkes Drücken beschädigt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Ecken mit T-Clips bestückt sind und alle Bänder an den T-Clips gelöst sind.
4. Stellen Sie vor der Verwendung des Spenders sicher, dass der obere T-Clip durch das Gummiband etwa 1 mm aus der Öffnung gezogen wird. Wenn nicht, ziehen Sie den oberen T-Clip leicht heraus.
5. Wenn Sie den Spender verwenden, treten Sie in den mittleren Teil des Spenders und drücken Sie mit gleichmäßiger und einmaliger Kraft. Andernfalls wird das Lösen des Schuhüberzugs beeinträchtigt.
6. Wenn der Gleitblock nach längerem Gebrauch nicht mehr richtig funktioniert, verteilen Sie

etwas Schmieröl im Gleitschlitz, um die Reibungskraft zu verringern.

7. Die Freigabe der Überschuhe kann beeinträchtigt werden, wenn die Überschuhe lange vor der Verwendung geladen werden. Es ist besser, die Überschuhe unmittelbar vor der Verwendung zu laden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Vertreter der Europäischen Kommission: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI
COPRISCARPE
MODELLO: A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODELLO: A1



contattarci.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto i nostri prodotti di alta qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, ti consigliamo di adottare le necessarie protezioni di sicurezza quando utilizzi il prodotto.

Leggi attentamente le seguenti istruzioni e comprendile.

Pertanto, il personale operativo e di manutenzione deve avere familiarità con il processo operativo e comprendere i possibili rischi per la sicurezza. I bambini non sono autorizzati a utilizzarlo. Fare riferimento al Codice generale per la prevenzione degli infortuni e al Codice di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa apparecchiatura non necessita di manutenzione da parte dell'utente. Qualsiasi manutenzione, regolazione e riparazione richiede operazioni professionali. Si prega di conservare questo manuale operativo.

INSTALLAZIONE O COPRISCARPA

 A pair of hands is shown opening a tan-colored rectangular box. Inside, a blue shoe cover is partially visible, and one hand is reaching in to pull it out.	 A pair of hands is shown pressing a blue shoe cover into a tan-colored rectangular box. The hands are positioned at the top corners, ensuring the cover fits snugly.
Apri un pacco di copriscarpe prestando attenzione alla lunghezza di la copertura della scarpa	Premere l'intera pila di pulsanti , insieme al Fessura a forma di T all'angolo del copriscarpe macchina e premere il tasto pulsante nella fessura
 A tan-colored rectangular box is shown with a blue shoe cover installed diagonally. The cover is stretched across the box, and its corners are secured with small clips.	 A tan-colored rectangular box is shown with a blue shoe cover installed. The cover is stretched across the box, and its corners are secured with small clips.
Il copriscarpe deve essere installato in diagonale e installare le clip rimanenti nello stesso modo come in passo 2.	Dopo i quattro angoli sono installato. allentare il legame che è legato alla scarpa copertina fibbia



COME PER UTILIZZARE IL DISTRIBUTORE



Let foot step in the middle of the machine

With a little effort, one stop in the end

Shoe cover automatically put on



ATTENZIONE

1. Assicurarsi che la lunghezza e la larghezza dei copriscarpe siano nella giusta direzione con il distributore.
2. Quando si caricano altri copriscarpe, premere la clip a T superiore rimasta all'interno dell'apertura a T e contemporaneamente posizionare le nuove clip a T. In caso contrario, le nuove clip a T non possono essere caricate e il distributore potrebbe rompersi se si preme con forza.
3. Assicurarsi che le clip a T siano inserite in tutti gli angoli e che tutti i nastri sulle clip a T siano slegati.
4. Prima di utilizzare il distributore, assicurarsi che la clip a T superiore sia estratta dall'apertura di circa 1 mm tramite l'elastico. In caso contrario, estrarre leggermente la clip a T superiore.
5. Quando si utilizza il distributore, premere sulla parte centrale del distributore con forza uniforme e una sola volta. In caso contrario, lo sgancio del copriscarpe potrebbe risultare compromesso.
6. Se il blocco scorrevole non funziona bene dopo un lungo utilizzo, distribuire un po' di olio lubrificante nella fessura di scorrimento per ridurre la forza di attrito.

7. Il rilascio dei copriscarpe potrebbe essere compromesso se i copriscarpe vengono caricati molto tempo prima dell'uso. È meglio caricare i copriscarpe appena prima di utilizzarli.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE CUBRECALZADOS

MODELO: A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODELO: A1



La empresa hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este manual esté actualizado, pero es inevitable que se produzcan errores. Si encuentra algún error, póngase en contacto con nosotros.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestros productos de alta calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le recomendamos que utilice las medidas de seguridad necesarias al utilizar el producto. Lea atentamente las siguientes instrucciones y compruébelas.

Por lo tanto, el personal de operación y mantenimiento debe estar familiarizado con el proceso de operación y comprender los posibles riesgos de seguridad. No se permite el uso de niños. Consulte el Código General de Prevención de Lesiones y el Código de Seguridad y Salud Laboral.

Este equipo no requiere mantenimiento por parte del usuario. Cualquier mantenimiento, ajuste o reparación requiere intervención profesional. Conserve este manual de instrucciones.

INSTALACIÓN CUBRE ZAPATOS

	
Despliega un paquete de fundas para zapatos prestando atención a la longitud de la funda del zapato	Aprieta toda la pila de botones, al mismo tiempo que Ranura en forma de T en la esquina de la cubierta del zapato máquina y presione el botón en la ranura
	
La cubierta del zapato debe ser instalado en diagonal e instalar los clips restantes en el mismo manera como en Paso 2.	Después de las cuatro esquinas están instalado. afloje la atadura que está atado al zapato cubrir hebilla



CÓMO PARA USAR EL DISPENSADOR



Let foot step in the middle of the machine

With a little effort, one stop in the end

Shoe cover automatically put on



ATENCIONES

1. Asegúrese de que los lados largo y ancho de las cubiertas para zapatos estén en la dirección correcta con el dispensador.
2. Cuando cargue más cubiertas de zapatos, presione el clip en T superior que queda dentro de la abertura en T y coloque los nuevos clips en T al mismo tiempo. De lo contrario, los nuevos clips en T no se podrán cargar y el dispensador podría romperse si presiona con fuerza.
3. Asegúrese de que los clips en T estén cargados en todas las esquinas y que todas las cintas de los clips en T estén desatadas.
4. Antes de usar el dispensador, asegúrese de que el clip en T superior salga de la abertura aproximadamente 1 mm con la banda elástica. De lo contrario, tire ligeramente del clip en T superior.
5. Al utilizar el dispensador, párese en la parte central del dispensador y presione con fuerza uniforme y una sola vez. De lo contrario, la liberación de la cubierta del zapato se verá afectada.
6. Si el bloque deslizante no funciona bien después de usarlo durante un tiempo prolongado, esparza un poco de aceite lubricante en la ranura deslizante para reducir la fuerza de fricción.
7. La liberación de la cubierta del zapato puede verse afectada si las cubiertas del zapato se

cargan durante mucho tiempo antes de su uso. Es mejor cargar las cubiertas del zapato justo antes de usarlas.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE DEL CE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK OCHRANIACZY
NA BUTY
MODEL:A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODEL: A1



błędy mogą być nieuniknione. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek błędy, skontaktuj się z nami.

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie naszych wysokiej jakości produktów. Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, zalecamy podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu. Przeczytaj uważnie i zrozum poniższe instrukcje.

Dlatego personel obsługi i konserwacji musi być zaznajomiony z procesem obsługi i rozumieć możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno go używać. Zapoznaj się z Ogólnym Kodeksem Zapobiegania Urazom i Kodeksem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ten sprzęt nie wymaga konserwacji przez użytkownika. Wszelkie prace konserwacyjne, regulacje i naprawy wymagają profesjonalnej obsługi. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi.

INSTALACJA O OCHRONA NA BUTY

 A pair of hands is shown opening a tan-colored rectangular box. Inside, a blue plastic bag is partially visible. A yellow circle with the number '1' is in the top left corner.	 A pair of hands is shown pressing down on a blue plastic bag inside the tan box. A yellow circle with the number '2' is in the top left corner.
Rozłóż paczkę ochroniaczy na buty zwracając uwagę na długość pokrowiec na buty	Ściśnij cały stos przycisków wraz z Szczelina w kształcie litery T w rogu osłony buta maszynę i naciśnij przycisk do gniazda
 The tan box is shown with the blue plastic bag fully installed inside. A yellow circle with the number '3' is in the top left corner.	 The tan box is shown with the blue plastic bag fully installed and secured. A yellow circle with the number '4' is in the top left corner.
Pokrowiec na buty musi być zainstalowany po przekątnej i zainstaluj pozostałe klipy w tym samym sposób jak w krok 2.	Po czterech rogach zainstalowany. poluzuj krawat, który jest przywiązany do buta okładka klamra



JAK JAK UŻYWAĆ DOZOWNIKA



Let foot step in the middle of the machine



With a little effort, one stop in the end



Shoe cover automatically put on



UPRZEJMOŚCI

1. Upewnij się, że długość i szerokość boków ochroniaczy na buty są ustawione w odpowiednim kierunku względem dozownika.
2. Podczas ładowania większej liczby ochroniaczy na buty naciśnij górny klips T pozostający w otworze T i jednocześnie włóż nowe klipsy T. W przeciwnym razie nie będzie można załadować nowych klipsów T, a dozownik może ulec uszkodzeniu w przypadku zbyt mocnego naciskania.
3. Upewnij się, że klipsy T są naciągnięte do wszystkich narożników i wszystkie wstążki na klipsach T są odwiązane.
4. Przed użyciem dozownika upewnij się, że górny zacisk T jest wysunięty z otworu na około 1 mm za pomocą gumki. Jeśli nie, delikatnie wyciągnij górny zacisk T.
5. Podczas korzystania z dozownika, należy stanąć na środku dozownika i nacisnąć równomiernie i jednorazowo. W przeciwnym razie osłona buta może się nie otwierać.
6. Jeśli blok przesuwany nie działa prawidłowo po dłuższym użytkowaniu, należy rozprowadzić odrobinę oleju smarującego w szczelinie przesuwnej, aby zmniejszyć siłę tarcia.
7. Zdejmowanie pokrowców na buty może być utrudnione, jeśli pokrowce na buty będą zakładane na długo przed użyciem. Lepiej jest założyć pokrowce na buty tuż przed ich użyciem.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

AUTOMATISCHE
SCHOENENOVERTREKDISPENSER
MODEL:A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODEL: A1



up-to-date is, maar fouten kunnen nog steeds onvermijdelijk zijn. Als u fouten vindt, neem dan contact met ons op.

INVOERING


Bedankt dat u voor onze hoogwaardige producten hebt gekozen. Om het risico op letsel te minimaliseren, raden wij u aan de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van het product. Lees de volgende instructies zorgvuldig door en begrijp ze.

Daarom moeten het bedienings- en onderhoudspersoneel bekend zijn met het bedieningsproces en de mogelijke veiligheidsrisico's begrijpen. Kinderen mogen het niet gebruiken. Raadpleeg de General Injury Prevention Code en de Occupational Health and Safety Code.

Deze apparatuur hoeft niet door de gebruiker te worden onderhouden. Elk onderhoud, elke aanpassing en reparatie vereist professionele handelingen. Bewaar deze bedieningshandleiding.

INSTALLATIE O F SCHOENOVERTREK

 1	 2
Vouw een bundel schoenovertrekken uit let op de lengte van de schoenovertrek	Knijp de hele stapel knoppen samen met de T-vormige gleuf aan de hoek van de schoenhoes machine, en druk op de knop in de sleuf
 3	 4
De schoenovertrek moet diagonaal geïnstalleerd en installeer de resterende clips in dezelfde zoals in stap 2.	Nadat de vier hoeken zijn geïnstalleerd. Maak de band los die is vastgebonden aan de schoen omslag gesp

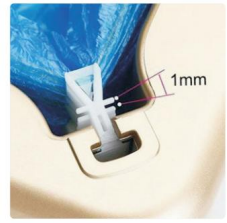

HOE GEBRUIK VAN DE DISPENSER



Let foot step in the middle of the machine



With a little effort, one stop in the end



Shoe cover automatically put on



AANDACHT

1. Zorg ervoor dat de lengte- en breedtezijden van de schoenovertrekken in de juiste richting zitten met de dispenser.
2. Wanneer u meer overschoenen wilt laden, drukt u op de bovenste T-clip die nog in de T-opening zit en plaatst u tegelijkertijd de nieuwe T-clips in de houder. Anders kunnen de nieuwe T-clips niet worden geladen en kan de dispenser kapotgaan als u te hard drukt.
3. Zorg ervoor dat de T-clips op alle hoeken vastzitten en dat alle linten van de T-clips loszitten.
4. Controleer voordat u de dispenser gebruikt of de bovenste T-clip ongeveer 1 mm uit de opening is getrokken met behulp van het elastiekje. Als dat niet het geval is, trekt u de bovenste T-clip iets naar buiten.
5. Wanneer u de dispenser gebruikt, moet u op het middelste gedeelte van de dispenser gaan staan en met een gelijkmatige, eenmalige druk op de dispenser drukken. Anders kan het loslaten van de overschoenen worden beïnvloed.
6. Als het glijblok na langdurig gebruik niet goed meer werkt, smeert u wat smeerolie in de glijgleuf om de wrijvingskracht te verminderen.
7. Als de overschoenen lang voor gebruik worden geladen, kan dit invloed hebben op de

ontgrendeling van de overschoenen. Het is beter om de overschoenen pas vlak voor gebruik te laden.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,shanghai 200000 CN.

EC-REP: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

AUTOMATISK DISPENSER FÖR SKOKÄLL

MODELL: A1

AUTOMATIC SHOE COVER DISPENSER

MODELL: A1



INTRODUKTION


Tack för att du valt våra högkvalitativa produkter. För att minimera risken för skador rekommenderar vi att du tar nödvändiga säkerhetsskydd när du använder produkten. Läs följande instruktioner noggrant och förstå.

Därför måste drift- och underhållspersonalen vara bekant med driftprocessen och förstå de möjliga säkerhetsriskerna. Barn får inte använda den. Se den allmänna koden för förebyggande av skador och koden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Denna utrustning behöver inte underhållas av användaren. Allt underhåll, justering och reparation kräver professionell verksamhet. Behåll denna bruksanvisning.

INSTALLATION O F SKOKÅL

 1	 2
Vik ut ett knippe skoskydd uppmärksamma längden på skoskyddet	Kläm ihop hela stapeln med knappar , även med T-formad slits i hörnet av skoskyddet maskinen och tryck på knappen i öppningen
 3	 4
Skoskyddet måste vara installerat diagonalt och installera de återstående klippen i samma sätt som i steg 2.	Efter de fyra hörnen är installerat. lossa slipsen som är knuten till skon täcka spänne

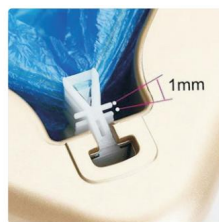

HUR ATT ANVÄNDA DISPENSERN



Let foot step in the middle of the machine



With a little effort, one stop in the end



Shoe cover automatically put on the shoe



OBS

1. Se till att längd- och breddsidorna på skoskydden är i rätt riktning med dispensern.
2. När du laddar fler skoskydd, tryck på den övre T-klämman som är kvar inuti T-öppningen och sätt ner de nya T-klämmorna samtidigt. Annars kan de nya T-klämmorna inte laddas och dispensern kan gå sönder om du trycker hårt.
3. Se till att T-klämmorna är laddade i alla hörn och att varje band på T-klämmorna är lossade.
4. Innan du använder dispensern, se till att den övre T-klämman dras ut ur öppningen ca 1 mm av gummibandet. Om inte, dra ut den övre T-klämman något.
5. När du använder dispensern, gå in i mitten av dispensern och tryck med jämn och engångsstyrka. Annars påverkas skoskyddets frigörande.
6. Om glidblocket inte fungerar bra efter att ha använts under en längre tid, sprid lite smörjolja i glidspåret för att minska friktionskraften.
7. Frigöringen av skoskyddet kan påverkas om skoskydden laddas länge före användning. Det är bättre att ladda skoskydden precis innan du använder dem.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730